

Advancis

Medical

Activon[®]

Tube

Instructions

for use

EN Instructions For Use

SV Användarinstruktioner

Activon® Tube

100% Medical Grade Manuka honey

Product description

Activon® Tube is 100% Medical Grade Manuka honey which has a reliable level of antibacterial potency not found in other honeys. In addition to its antibacterial properties, this wound filler benefits patients with wounds in a number of ways: it has an osmotic effect that helps to debride and deslough wounds, reduces odour and maintains a moist healing environment.

Indications

For use on Activon® honey impregnated wound dressings or as a wound filler, directly onto the wound bed, for partial or full thickness wounds including; sloughy wounds, pressure ulcers, surgical wounds, burns, graft sites and malodorous wounds.

Contra-Indications

Known allergy to bee-venom/honey.

Directions for use

Ensure the wound has been cleaned, gently dry the surrounding skin. Remove the sterile tube from the retail box. Twist off the Activon® Tube cap, apply liberal amounts of the Activon® Tube to the selected dressing of choice or as a filler directly onto the wound bed. Apply the selected secondary dressing as per the 'Instructions for Use' supplied with the dressing. Single patient use only.

Can be used for up to 90 days after opening.

Warnings and

Precautions

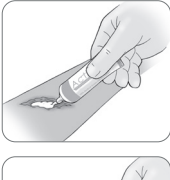
Although no known instances of increased levels of blood sugar in patients with diabetes, it is advisable to closely monitor the levels as this product contains glucose. A few patients may experience pain when applied, depending on the sensitivity of the wound, it may be necessary to consider an appropriate level of analgesia. If pain continues unabated, discontinue use and irrigate the wound with a saline solution.


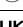


















Storage

Store at room temperature. Our honey is 100% Manuka honey. As a natural product this can vary in colour and in exceptional circumstances crystallisation can occur.

Disposal

Dispose of dressing as 'Clinical Waste'



	Catalogue Number
	Do not re-use
UK CA	UKCA mark for Great Britain
	Caution, consult instructions for use
	Quantity
	Unique Device Identifier (UDI carrier including the AIDC and human readable information)
	Date of manufacture/ Country of manufacture
	The product has made a financial contribution towards the recovery and recycling of packaging in Europe
	Consult instructions for use
	Keep dry
	Keep away from sunlight
	Manufacturer
	Authorized representative in the European Community
	Batch code
	CE Mark for Northern Ireland, EC & EU
	Do not re-sterilize
	Do not use if package is damaged
	Importer
	Single patient multiple use
	Sterilized using irradiation
	Quantity

Activon® Tube

Medicinsk Manukahonung

Produktbeskrivning

Activon® Tube är 100 % medicinsk Manukahonung som har antibakteriella egenskaper som inte finns i andra honungar. Utöver dess antibakteriella egenskaper gynnar detta sårfillnadsmaterial patienter på flera andra sätt: det har en osmotisk effekt som hjälper till att debridera sår och ta bort vävnadsrester, reducera odörer och bibehåller även en fuktig, läkande miljö.

Indikationer

För användning på Activon® honungsdränkta förband eller som sårfillare, direkt på sårbädden, för delhudsskador eller fullhudsskador inklusive sår med sårskorpa, trycksår, operationssår, brännskador, transplantatställen och illaluktande sår.

Kontraindikationer

Kända allergier mot bigift/honung.

Bruksanvisning

Kontrollera att såret har rengjorts och torka försiktigt den omgivande huden. Ta ut den sterila tuben från förpackningen. Vrid loss locket på Activon® Tube och applicera rikligt med produkten på förbandet, eller som ett fyllningsmedel direkt på sårbädden. Lägg på det andra förbandet enligt bruksanvisningen som levereras med förbandet.

Endast för användning på en patient. Kan användas i upp till 90 dagar efter öppnande.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Även om inga fall då patienter med diabetes fått förhöjt blodsocker är kända, är det tillrådligt att noga övervaka nivåerna då denna produkt innehåller glukos.

Vissa patienter kan uppleva smärta vid applikationen så det kan, beroende på sårets känslighet, vara nödvändigt att överväga bruk av lämplig smärtlindring. Om smärtan förblir oförsvagad ska förbandet tas bort och såret sköljas med saltlösning.

Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur. Vår honung är 100% Manukahonung. Eftersom det är en naturprodukt kan den variera i färg och under exceptionella förhållanden kan det uppstå kristallisering.

Kassering

Kasseras som kliniskt avfall.



REF	Katalognummer
	Får ej återanvändas
UK CA	UKCA-märkning för Storbritannien
	Varning! Se bruksanvisningen
	Antal
UDI	unika produktidentifiering Identifierare (UDI-bärare inklusive AIDC och information som är läsbar för människor information)
	Tillverkningsdatum/ Tillverkningsland
	Tillverkaren har bidragit till återvinningen och återanvändningen av förpackningsmaterial i Europa.
	Läs bruksanvisning
	Förvaras torrt
	Skyddas från solljus
	Tillverkare
EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/ Europeiska unionen
LOT	Partinummer
	CE-märkning för Nordirland, EC och EU
	Får ej omsteriliseras
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Importör
	Kan användas flera gånger, men endast på en och samma patient
STERILE R	Steriliserad genom strålning
	Antal



Brightwake Ltd,
Lowmoor Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottingham,
NG17 7JZ,
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1623 751151
www.brightwake.co.uk



CS Lifesciences Europe
Ltd,
The Black Church
St Mary's Place,
Dublin 7,
Dublin

DO7 P4AX

Ireland

eurep@cslifesciences.com



AW882/v1 (10/2022)